

Návod k použití


Název výrobku / obchodní název

Pyromol-Test

Popis produktu / zamýšlený účel

Přístroje Pyromol-Test se používají k detekci zbytků bílkovin na chirurgických nástrojích a površích. Přístroje používají zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Návod k použití

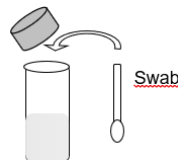

1. Mokré povrchy se stírají suchým vatovým tamponem. Suché povrchy se stírají po navlhčení tamponu kapkou čisté vody.
2. Vzorek důkladně setřete tamponem. Zaměřte se na oblast, kde se předpokládají zbytky (spáry, štěrby, viditelné skvrny nebo změna barvy). Používejte delší tampony, které jsou k dispozici pro kanylované nástroje.
3. Vhodte tampon do lahvičky, uzavřete ji a nechte 5 minut stát. Zkontrolujte, zda se barva tamponu nezměnila na modrozelenou, což ukazuje na zbytky bílkovin na testovaném povrchu. Pokud jsou přítomny zbytky bílkovin, může být po 1 minutě viditelná změna barvy. Delší čekací doba zajistí jasnější výsledek a výraznější barvu.
4. Zaznamenejte výsledek pro zajištění kvality. Na tamponu s 1 µg bílkovinného zbytku se vytvoří malá modrozelená skvrna. Velké množství rozpustných bílkovin může změnit celý testovací roztok na modrozelený.

POZNÁMKA: V případě chirurgických nástrojů s klouby se zbytky krve nejčastěji vyskytují uvnitř kloubů, z nichž nelze odebrat vzorek tamponem. Za tímto účelem by se měly k kontrole čistící účinnosti mycího a dezinfekčního zařízení použít indikátory TOSI.



Verze a datum vydání IFU.

Verze: 2.0 / Datum: 22.07.2025

Výkonnostní charakteristiky

Testovací souprava dokáže detekovat 1 µg proteinu.

Pro detekci zbytků bílkovin se používá metoda vazby barviva.

V případě poruchy / změny výkonu

Bezpečné jsou pouze zcela čisté nástroje. Zbytky prokázané Pyromol-Testem jsou známkou neúčinného čistícího procesu.

Bezpečnostní opatření:

- Balení otevřete opatrně a manipulujte s ním opatrně.
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k potravinám.
- Zabráňte kontaktu s kůží a očima.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi.
- Používejte ochranu očí (ochranné brýle proti stříkajícím chemikáliím).
- Používejte rukavice odolné proti chemikáliím.
- Ochrana proti vdechnutí v případě výparů nebo aerosolu.
- Nepoužívejte dvakrát.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny.

Bezpečné kombinace se zařízeními/vybavením

Používejte pouze tampony dodávané s Pyromol-Testem.

Omezení kombinací

Kontakt s alkalickými látkami může vést k falešně pozitivnímu výsledku. Kvartérní amonné soli (používané v některých dezinfekčních prostředcích) dávají falešně pozitivní výsledek.

Otisky prstů mohou obsahovat bílkovinné částice a mohou poskytnout falešně pozitivní výsledek.

Každá testovací sada obsahuje:

20 X test na jedno použití pro detekci zbytků bílkovin na přístrojích a površích.

O lahvička Pyromol-Test

O tampon

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace

- Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C
- Skladujte v uzavřeném původním obalu.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi.

Nežádoucí účinky:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Bezpečná likvidace zařízení

Pyromol-Test likvidujte v souladu s platnými místními předpisy.