

Návod k použití


Název výrobku / obchodní název

TOSI®-FlexiCheck

Popis produktu / zamýšlený účel


Zařízení TOSI-FlexiCheck/FlexiCheck se používají k rutinnímu monitorování a validaci účinnosti čištění endoskopických myček. Přístroje používají zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD v nemocnicích a lékařských ordinacích.

Návod k použití

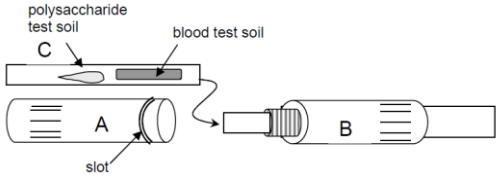

Po celou dobu testu je nutné nosit rukavice, aby nedošlo ke kontaminaci testu.

1. Odšroubujte zařízení FlexiCheck: oddělte díl A (označený drážkou) od dílu B (viz obrázek).
2. Otevřete ochranné pouzdro TOSI®-FlexiCheck a vložte testovací předmět (část C) do části B, jak je znázorněno na obrázku. Nedotýkejte se místa pokrytého testovací půdou.
3. Zařízení FlexiCheck opět zavřete.
4. Připojte zařízení FlexiCheck k jednomu z kanálků zavlažovacího systému pračky (luer-lock) a spusťte cyklus podle pokynů výrobce.
5. Otevřete přístroj po cyklu opakovaného zpracování: odpojte část A od části B a vyjměte TOSI®-FlexiCheck, aniž byste se dotkli oblasti testovací půdy! Zkontrolujte, zda nejsou viditelné zbytky.
6. V případě neuspokojivých výsledků se podívejte do průvodce řešením problémů.

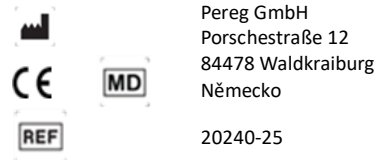

Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Německo

20240-25

Výkonnostní charakteristiky

Standardizovaná testovací půda podle EN ISO 15883-5 sestávající z purifikovaných hovězích proteinových frakcí.

V případě poruchy / změny výkonu

Bezpečné jsou pouze zcela čisté nástroje. Zbytky na přístroji TOSI- FlexiCheck jsou známkou neúčinného procesu čištění.

Bezpečnostní opatření:

- Balení opatrně otevřete a opatrně s ním zacházejte.
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k potravinám.
- Zabraňte kontaktu s kůží a očima.
- Při manipulaci s chemikáliemi je zásadně nutná ochrana očí. Používejte rukavice odolné proti chemikáliím.
- Nepoužívejte dvakrát.
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny.

Omezení kombinací

TOSI-FlexiCheck je pouze testovací položka pro ověření čistícího výkonu podložek pod endoskopy.

Každá testovací sada obsahuje:

25 X testů

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace

- Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C
- Skladujte v uzavřeném původním obalu.
- Uchovávejte v původním obalu. Ochranné pouzdro otevírejte až po použití.
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi.
- Chraňte před dezinfekčními prostředky a výpary.

Nežádoucí účinky:

Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s prostředkem, by měl být nahlášen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte.

Bezpečná likvidace zařízení

TOSI-FlexiCheck zlikvidujte v souladu s platnými místními předpisy.

Verze a datum vydání IFU.

Verze: 2.0 / Datum: 22.07.2025