

Instrukcja używania


Nazwa produktu / nazwa handlowa

TOSI®-LumCheck

Opis produktu / przeznaczenie


Wyroby TOSI-LumCheck/LumCheck są używane do rutynowego monitorowania i walidacji skuteczności czyszczenia myjni-dezynfektorów i myjek ultradźwiękowych. Wyroby te są używane przez specjalistów medycznych i przeszkolony personel odpowiedzialny za sterylizację w szpitalach i gabinetach lekarskich.

Instrukcja używania

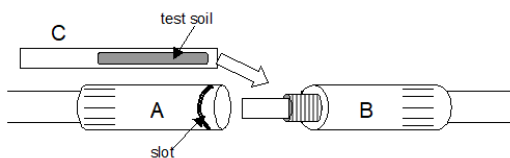

Podczas całej procedury testowej należy nosić rękawiczki, aby uniknąć zanieczyszczenia testu.

1. Odkręcić wyrób LumCheck: odłączyć część A (oznaczoną szczeliną) od części B (patrz ilustracja).
2. Otworzyć woreczek ochronny TOSI®-LumCheck i włożyć badany obiekt (część C) do części B, jak pokazano na ilustracji. Nie dotykać obszaru pokrytego zabrudzeniami testowymi.
3. Zamknąć ponownie wyrób LumCheck.
4. Podłączyć wyrób LumCheck do systemu płukania myjki (np. luer-lock) lub przeprowadzić jego przetwarzanie w taki sam sposób, jak w przypadku narzędzi kaniulowanych.
5. Otworzyć wyrób po cyklu ponownego przetwarzania: odłączyć część A od części B, aby usunąć TOSI®-LumCheck bez dotykania obszaru zabrudzeń testowych! Sprawdzić, czy nie ma widocznych pozostałości.
6. W przypadku niezadowolających wyników należy zapoznać się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów.

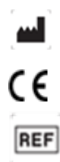

Pereg GmbH
Porschestraße 12
84478 Waldkraiburg
Niemcy

20100-25

Parametry użytkowe

Znormalizowane zabrudzenia testowe zgodne z normą EN ISO 15883-5 składające się z oczyszczonych frakcji białek bydłych.

W przypadku nieprawidłowego działania / zmiany parametrów użytkowych

Tylko całkowicie czyste narzędzia są bezpieczne. Pozostałości na wyrobie TOSI-LumCheck wskazują na nieskuteczny proces czyszczenia.

Środki ostrożności:

- Ostrożnie otworzyć opakowanie i obchodzić się z jego zawartością.
- Nie jeść i nie pić w pracy. Nie palić. Trzymać z dala od żywności.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
- Zasadniczo podczas pracy z chemikaliami konieczna jest ochrona oczu. Nosić rękawice odporne na chemikalia.
- Nie używać dwukrotnie.
- Używać tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przed interpretacją wyników należy uważnie przeczytać instrukcję.

Ograniczenia dotyczące kombinacji

TOSI-LumCheck jest jedynie elementem testowym służącym do weryfikacji skuteczności czyszczenia myjni-dezynfektorów i myjek ultradźwiękowych.

Każdy zestaw testowy zawiera:

25 testów

Specjalne warunki przechowywania i/lub obsługi

- Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C
- Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie otwierać woreczka ochronnego przed użyciem.
- Przechowywać z dala od światła, ciepła i chemikaliów.
- Przechowywać z dala od środków dezynfekujących i oparów.

Zdarzenia niepożądane:

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

Bezpieczna utylizacja wyrobu

TOSI-LumCheck należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.

Wersja i data wydania IFU.

Wersja: 2.0 Data: 22.07.2025